



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 008 REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG



POP SND 008 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 10/05/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

1. OBJETIVO:

Realizar exame da mesma forma que o eletroencefalograma, com acréscimo de um registro simultâneo em vídeo. Os resultados da atividade cerebral e as imagens são avaliados por um médico especialista em exame de neurofisiologista.

2. ABRANGÊNCIA:

Médicos Neurologista, enfermeiro e técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamento de Proteção individual (EPIS): Luvas de procedimento.

3.2. Materiais e Equipamentos: Equipamento de eletroencefalográfico digital com câmera, jogos de eletrodos específicos para EEG, Pasta de boa qualidade e boa condutividade elétrica para fixar eletrodos,, para fixação de eletrodos, espátula descartável, Álcool 70 INPM, atadura crepe, Micropore, gaze não estéril, lençol descartável, tecido de algodão cru cortado em pedaços, gel para fixação de eletrodos, caneta demarcadora, gel para limpeza do couro cabeludo, SF 0,9% 10 ml, pente de cabelo, cama com grade, Escadinha, livro ata para registro dos pacientes, campainha, fita métrica.

4. PROCEDIMENTO:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Entrar em contato com a Unidade de Internação em que o paciente está admitido para confirmar a realização do preparo;

4.3. Solicitar o transporte do paciente ao Serviço de Neurologia Diagnóstica;

4.4. Orientar o paciente quanto ao exame a ser realizado;

4.5. Ligar o monitor;

4.6. Registrar os dados do paciente;

4.7. Realizar novamente a Higienização das mãos, com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);

4.8. Colocar as luvas de procedimento;

4.9. Acomodar o paciente no divã ou poltrona;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 008 REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG



POP SND 008 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 10/05/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

- 4.10. Posicionar a cabeça do paciente para início do exame;
- 4.11. Passar pasta nos eletrodos;
- 4.12. Realizar limpeza do couro cabeludo para diminuição da impedância;
- 4.13. Fazer a marcação do sistema 10x20;
- 4.14. Fixar cada um dos eletrodos posicionados;
- 4.15. Checar a impedância;
- 4.16. Envolver os eletrodos do couro cabeludo com atadura crepe;
- 4.17. Fixar, com micropore, os dois eletrodos cardíacos;
- 4.18. Iniciar o exame com duração de 24 horas ou conforme orientação médica;
- 4.19. Posicionar corretamente a câmera;
- 4.20. Orientar a equipe de enfermagem quanto à atenção ao paciente durante o exame;
- 4.21. Realizar o exame;
- 4.22. Aguardar o término do exame para desligar a câmera e o monitor;
- 4.23. Informar ao paciente o término do exame;
- 4.24. Retirar cuidadosamente os eletrodos do paciente;
- 4.25. Retirar todo o excesso de pasta que esteja aderida ao couro cabeludo;
- 4.26. Orientar a lavagem do couro cabeludo;
- 4.27. Liberar o paciente;
- 4.29. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.30. Registrar o exame no prontuário do paciente.

5. CONTINGÊNCIA:

Na impossibilidade de fazer o exame, rever com a equipe médica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Em caso de pacientes internados verificar o RG, Nome completo antes de iniciar o exame, e confirmar junto a pulseira de identificação.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 008 REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG



POP SND 008 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 10/05/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

6.2. Quando houver queda de energia e necessário entrar em contato com o setor de EEG para que seja reprogramado o aparelho.

6.3. Em casos de pacientes com alguma precaução: contato, gotículas ou aerossóis, o profissional de saúde deve seguir orientações do Protocolo da CCIRAS – PRC CCIRAS 012 – PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE CONTATO, disponível na Intranet do HC: <http://testesite.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/04/PRC-CCIRAS-012-Protocolo-de-Medidas-de-Precaução-de-Contato.pdf>.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Ione Correa, Elisabete D. Cassinelli, Eliane de Souza Gomes, Rosineide A. dos Santos Godoy, Amanda dos Santos Cecílio

7.2. Revisores – Amanda dos Santos Cecílio e Lucas Cornetta Rosa.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hendricks, H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.

- FELIPPE, MJDB. SILVA, NAM e GARCIA, VC. MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Internação – Terceiro Andar Esquerdo. Hospital Estadual Bauru. 2006. R 03, 32p.

- Kimura J. Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle. Principles and practice. FA Davis: Philadelphia, 1983.

- Godaux. Électromyographie. Séméiologie et physiopathologie. Paris: Masson, 1989.

- Basmajian JV. Muscles alive. Their functions revealed by electromyography. 3rd ed, Baltimore: Williams & Wilkins, 1974.

- Dumitru D. Electrodiagnostic Medicine. Philadelphia: Hanley & Belfus, 1995.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.





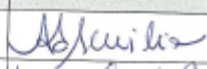
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND **008** REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG



POP SND **008** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **10/05/2018** REVISÃO Nº **01** : **01/04/2021**

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

		HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail: qualidade.hcimb@unesp.br			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO					
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO					
1.1. Título: POP SND 008 – REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG					
1.2. Área Responsável: SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA					
1.3. Data da Elaboração: <u>10/05/2018</u> Total de páginas: <u>04</u> Data da Revisão: <u>01/04/2021</u> Número da Revisão: <u>01</u>					
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:					
Nome		Função	Setor	Assinatura	
Amanda dos Santos Cecílio		Enfermeira	NPDT		
Lucas Cometta Rosa		Supervisor Administrativo	NÚCLEO DE FISIODIAGNÓSTICO		
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):					
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP SND 008 – REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEO EEG					
Também autorizo a exposição do meu nome completo.					
Data: <u>12/09/20</u>	Assinatura: 				
	Gerência de Enfermagem do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira				
Data: <u>02/05/22</u>	Assinatura: 				
	Responsável Médico: Dr. Luiz Eduardo Gomes Garcia Betting				